

Buggy-Style Wheelchair



SKI2_{RR}

バギースタイル車いす
スキップ_ダブルアール

状態や成長に応じて、
様々な調整ができる
バギースタイルの軽量車いす。



SKIP_R/R

バギースタイル車いす[スキップ_ダブルアール]／オープン価格

耐荷重
50kg

×

軽量
シンプル

軽量・コンパクトで小回りが利き、
シンプルで取扱いが簡単なバギーのような車いす。
お子さまがウトウトしだしたら、
背もたれを倒してちょっとお昼寝しましょう。

包み込むハンモック型の車いすとは違い、

上体を起こし視線を上げた「アップライトな姿勢」で座れるバギースタイルの車いすです。

お子さまの状態や成長に応じて、ステップ高などの様々な調整ができます。

さらに、車いすと同じ耐久試験もクリアしているので安全に長くご使用いただけます。

体型に合わせて、S・M・Lフレームの3サイズよりお選びください。



M

- 全 長：810mm
- 全 幅：540mm
- シート幅：320mm

Frame

S Frame

- 全 長：650mm
- 全 幅：500mm
- シート幅：280mm



L Frame

- 全 長：870mm
- 全 幅：580mm
- シート幅：360mm



● 折りたたみロック機構

前後方向に対して折りたたむ構造のため、前後方向の慣性負荷に対してロック機構を設定。折りたたんだ状態で自立し、置き場所に困りません。

とても
コンパクト




Mフレーム▶
折りたたみ

● 仕様諸元

フレームサイズ	S	M	L	備考
全長	650	810	870	※8
全幅	500	540	580	
全高	965～1,130			
シート幅 ※1	280	320	360	
A シート奥行 ※2	210/230/250/270/290	270/290/310/330/350	330/350/370/390/410	
B バックサポート高	570			
シート形状	2ピース			
バックサポートシート仕様	テンション調整シート			
主輪径	8インチ 発泡タイヤ			
キャスタ径	6インチ 発泡タイヤ			
ブレーキ取付位置	後輪付近にSTブレーキ取付			
C アームサポート高	190/205/220/235/250			
D フットサポート・シート間距離 ※3	80/100/120/140/160/180/200	230/245/260/275/290/305	280/295/310/325/340/355	
座角度 ※4	10°			
E リクライニング角度 ※5	85/92/99/106°			
F 前座高 ※6	435/438/442/445/448	445/448/451/456/460	455/458/461/465/468	
G 後座高 ※7	395			
折りたたみ時の全長	450	480	530	
折りたたみ時の全幅	500	540	580	
折りたたみ時の全高	965	965	965	
重量	9.2kg	9.5kg	9.9kg	

※1 座パイプ内々の幅 ※2 20mmピッチ、5段階 ※3 Sフレーム：20mmピッチ、7段階 M・Lフレーム：15mmピッチ、6段階 ※4 水平基準より上方へ ※5 7°ピッチ、4段階 ※6 シート生地も含めた参考値寸法のため、公差範囲±2mmを適用とします ※7 背パイプとシートパイプの交点 ※8 リクライニング85°/全高965mm時・または手押しハンドルを最大まで下げた時 フットサポート・シート間距離最小时

● 側面図

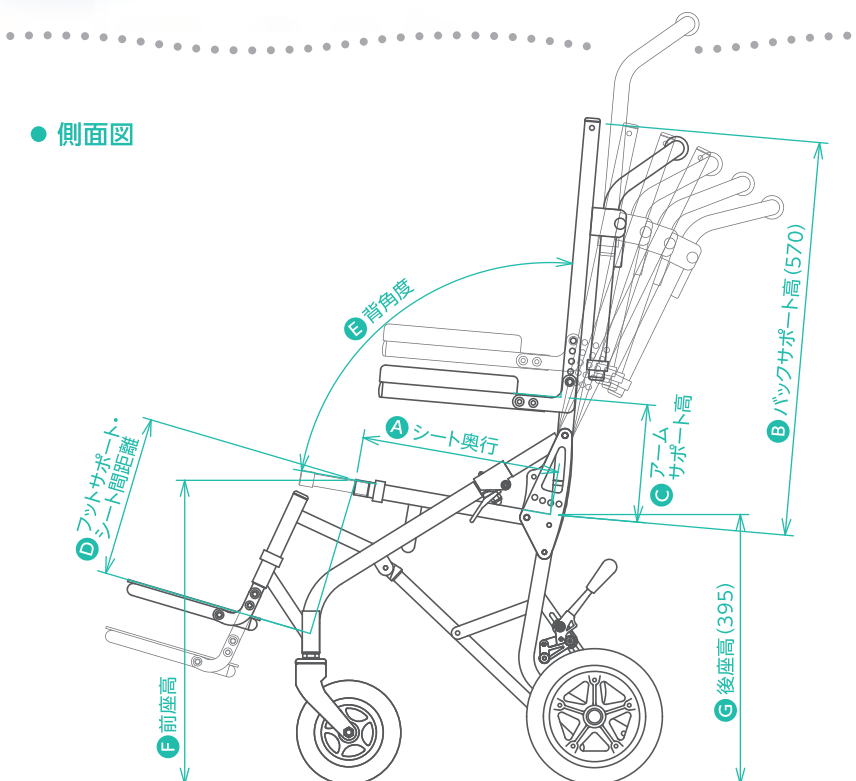

※6 シート生地も含めた参考値寸法のため、公差範囲±2mmを適用とします ※7 背パイプとシートパイプの交点

標準装備

● リクライニング機能

ゆったりとくつろぎたい時や姿勢の変換が必要な時に、後部のワイヤーを引くことで背もたれの角度を変えることができます。(7°ピッチ、4段階)



調整4段階
85/92/99/106°



● 手押しハンドル高さ調整

介助者の身長に合わせて、手押しハンドルの高さを無段階に調整できます。



● シート奥行調整

工具レスでシートの奥行きを変えることができます。(20 mmピッチ、5段階)



● ステップ高調整

S フレームはボルト固定調整。M・L フレームは工具レスステップ高調整のため、下腿長を適合させやすくなります。(S フレーム：20 mmピッチ、7 段階 M・L フレーム：15 mmピッチ、6 段階)



Sフレーム



M・Lフレーム ※イメージはLフレームです

● テンション調整シート

利用者の姿勢に応じて、背の張り調整ができます。

オプション・アクセサリ

● 延長ヘッドサポート

身長に合わせて背高を延長させる事ができます。
200 mm長



● 枕

延長ヘッドサポートに取り付ける専用枕です。
※延長ヘッドサポート併用必須



● 胸ベルト(バックル付)

姿勢補助や転落防止に使用。補助用バックル付きです。



● 体幹パッド

体を支えるパッド。インナーシートとアウターシート
の間にマジックテープで取り付けます。



● 腰ベルト

姿勢補助や転落防止に使用します。



● 転倒防止バー

リクライニング時の後方への転倒を防止します。



● 座クッション(専用クッション)

外転&内転防止・アンカーサポートが付いた姿勢保持形状です。スリングシートへの対応コンツアベース付き。



● クッションテーブル

クッションカバー付きテーブルです。受け金具にテーブルステーを差し込んで固定します。



● 三角パッド(片側)

クッションテーブルに取り付ける上肢脱落防止サイドガード。 ※クッションテーブル併用必須



● 木製テーブル

標準サイズの木製テーブル。



● 足台クッションカバー

ステップに取り付けるネオプレン製の保護カバーです。



● 荷物台(ナイロン製)

座下にセットできる荷物台です。



● サンシェイド

利用者を直射日光から防ぐ日よけ。収納袋・受け金具付きです。



● レインカバー

サンシェイドの上から取り付ける雨具です。

※サンシェイドとの併用必須



※SKIP_R/Rは、株式会社 ミキ と 株式会社 コーヤシステムデザインとの共同開発商品です。

※車いす購入時は非課税となります。 価格は全てオープン価格です。

詳細はFORCE webサイトからダウンロードできる最新版オーダーフォームでご確認ください。

<http://miki-force.jp>



株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市中南区豊三丁目38番10号

お問い合わせは 株式会社 ミキ お客様サポート窓口 まで

TEL 0570-00-3993 ※愛知県への通話料が発生します。

[ホームページ] <http://www.kurumaisu-miki.co.jp/>

お問い合わせ